DogSim

Introduction

DOGSIM est un appareil dont le but est de simuler le déplacement avec un chien guide. Il facilite la formation de la personne aveugle ou déficiente visuelle avant la remise définitive du chien guide.

DOGSIM est destiné à un usage à l'extérieur comme à l'intérieur. La présence d'un instructeur en locomotion ou d'un éducateur de chien guide est indispensable par garantir la protection de la personne à former. Toute utilisation non-conforme se fait sous la responsabilité de son utilisateur. En aucun cas, VISIOPTRONIC, ou un de ses partenaires de distribution ne sauraient être tenus pour responsables en cas d'utilisation détournée.

DOGSIM est un produit 100% français, fabriqué en France et uniquement disponible via la société VISIOPTRONIC. Nous vous félicitons pour cette acquisition et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfaction dans le cadre de la formation des personnes déficientes visuelles.


Présentation de l'appareil

Il s'agit d'un ensemble de deux perches télescopiques, reliées par une pièce de jonction articulée autorisant une rotation verticale à 360°.

Le manche A, réservé à la personne à former, se distingue par la présence d'une poignée. Sur cette poignée se trouve un bouton poussoir. En l'enfonçant, la poignée peut être tournée à 360° pour s'adapter à une tenue en main la plus naturelle possible pour son utilisateur. En relâchant le bouton, la poignée se bloque dans la position choisie.

Le manche B est réservé au formateur.

L'ensemble pèse 458 gr. Il peut être utilisé aussi bien avec des droitiers que des gauchers sans aucune différence d'efficacité ou dans le maniement.

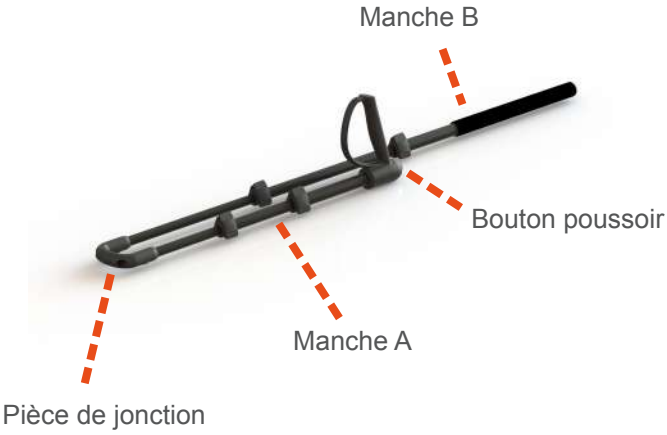



Première utilisation



Avant toute première utilisation, nous recommandons de faire découvrir l'appareil par la personne à former en le lui remettant en main et en expliquant les différentes parties qui le composent.

Prenez l'appareil dans votre main et positionnez-vous sur le côté gauche de la personne déficiente visuelle.
Réglez le manche instructeur (B) au maximum de sa longueur et adaptez le manche A à la taille de la personne. Bien réglée, la pièce de jonction qui relie les deux manches doit se trouver à 45 - 50 cm du sol lorsque l'instructeur et la personne à former tiennent chacun leur partie du DOGSIM.
L'apprenant tient la poignée dans sa main gauche (car le chien guide se trouve habituellement à gauche de son maître). Vous tenez votre manche dans la main droite afin d'être légèrement décalé et en retrait par rapport à l'apprenant.
Le bras de la personne à former ainsi que le vôtre sont en position détendue le long du corps. Vous êtes prêt à démarrer le travail.

Les exercices pour instructeurs en locomotion et éducateurs de chien guides

Retrouvez sur notre site www.visioptronic.fr les vidéos de démonstration des exercices et surtout, n'hésitez pas à partager les vôtres ! direction@visioptronic.fr



En tant que formateur, la « conduite » du DOGSIM s'apparente à la conduite d'un véhicule, portez votre regard au loin, plusieurs mètres devant vous. Cette attitude, naturelle, lorsqu'on se trouve en voiture, sur un vélo ou une moto, doit souvent être travaillée quand on se déplace à pied.



Nous vous recommandons vivement de vous habituer au déplacement avec le DOGSIM entre collègues formateurs ou avec d'autres personnes voyantes avant de l'utiliser avec une personne déficiente visuelle non habituée aux déplacements avec un chien guide.

• Tout droit

L'apprenant donne l'ordre verbal convenu pour démarrer, vous avancez en ligne droite et l'apprenant démarre après avoir senti la traction vers l'avant dans la poignée qu'il tient. Cet exercice permet de tester l'allure de marche de la personne. Pour cela, modifiez votre allure de marche et simulez une traction plus ou moins importante.

• Tourner à gauche / à droite

Cet exercice existe avec ou sans ordre verbal de la part de l'apprenant.
Sans ordre verbal, c'est vous qui choisissez de modifier la trajectoire en tournant vers la gauche ou la droite. Dans ce cas, on teste l'aptitude de la personne à percevoir les changements directionnels et sa capacité à s'y adapter rapidement.

Avec ordre verbal, l'apprenant donne l'ordre, vous vous exécutez en tenant compte de l'environnement pour adapter votre déplacement au lieu. Ceci s'utilise dans le travail de préparation avant l'arrivée du chien pour finaliser la compréhension des trajets et leur mémorisation.

Pour tourner à gauche, vous pointez la pièce de jonction vers la gauche en écartant votre bras, toujours détendu, vers la droite. Ne modifiez pas votre position par rapport à celle de l'apprenant. Ramenez le bras en position détendue sur votre flanc droit lorsque vous avez atteint la nouvelle direction souhaitée.

Pour tourner à droite, bras détendu, vous passez le bras qui tient le manche devant vous et selon le degré souhaité, exercez une rotation de votre corps vers la droite pour accentuer le virage. Une fois la nouvelle direction atteint, votre bras revient en position le long du corps.
Plus le virage sera serré, plus vous devrez l'anticiper en tournant autour de l'apprenant.
Pour un virage très serré à droite, nous vous recommandons un changement de main : ainsi vous passez le manche instructeur de votre main droite à votre main gauche le temps de l'exercice.

• Passage étroit

Habituellement, vous marchez à côté de l'apprenant légèrement en retrait. Lors d'un passage étroit (passage de porte simple, couloirs ou escaliers étroits, etc.), vous passez le manche dans la main gauche et vous vous placez derrière l'apprenant le temps nécessaire. Dès que possible, vous reprenez votre position normale sur le côté.

• Escalier montant

Dirigez-vous vers l'escalier et, si il y en a une, vers la main courante sur le côté droit. Avancez jusqu'à ce que la pièce de jonction soit au-dessus de la première marche, levez l'appareil de 10 à 15 cm (cela correspond aux pattes avant du chien qui se place sur la première marche de l'escalier). En même temps, tournez la tête de jonction afin qu'elle pointe vers la main courante et arrêtez-vous.
L'apprenant place sa main droite sur la main courante, un pied sur la première marche, puis il donne l'ordre verbal pour avancer.
Durant la montée, gardez le manche instructeur dans une inclinaison parallèle à celle de l'escalier.
Lorsque la pièce de jonction atteint le haut de l'escalier, ou un palier, vous devez marquer un arrêt.

• Escalier descendant

Effectuez la même opération en sens inverse. N'oubliez pas de marquer un arrêt lorsque vous atteignez le palier du bas avec la pièce de jonction. Ensuite, relevez la pièce de jonction afin de la maintenir à une distance de 45 - 50 cm du sol jusqu'à ce que vous soyez arrivé en bas et à nouveau aux côtés de l'apprenant.

• Simuler l'arrêt

Arrêtez-vous. La personne ne doit plus avancer. N'oubliez pas que les deux manches sont reliés par une pièce de jonction qui autorise une rotation de 360° dans le sens vertical. La personne peut ignorer votre arrêt et continuer d'avancer. Elle devrait sentir que la position de la poignée, qu'elle tient dans sa main, se modifie sensiblement. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à le lui faire remarquer.

• Simuler un chien assis

Arrêtez-vous, relevez légèrement la pièce de jonction de 10 cm maximum et tirez un peu sur le manche instructeur pour faire reculer l'outil de 10 cm maximum également.

• Simuler une recherche (arrêt de bus, siège)

Allez droit vers l'objet demandé et arrivé à l'objet en question, pointez la pièce de jonction vers l'objet. Pour une demande de siège, placez la pièce de jonction à 10 cm au-dessus de l'assise du siège. Pour un guichet ou un arrêt de bus, adaptez-vous aux recommandations de votre Ecole de chiens guides.

• Simuler un chien attiré par quelque chose

Exercez une pression pour abaisser la pièce de jonction vers le sol, ou vers le côté gauche (rarement un chien succombera à la tentation d'aller vers un objet/personne en croisant sa trajectoire avec celle de son maître).

Pour une utilisation parfaite, une prise en main avant de travailler avec des personnes déficientes visuelles est indispensable. Plus vous allez utiliser le DOGSIM, plus vous allez développer une aisance et une fluidité dans tous les exercices que permet notre matériel. Ainsi vous donnerez à la personne déficiente visuelle une formation de qualité, très proche de son futur déplacement avec un chien guide.

Entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien spécifique. Il est conçu pour une utilisation par tous les temps. Non-corrosif, il ne nécessite aucun graissage spécifique. Entretenez son aspect extérieur en le nettoyant avec un chiffon doux, légèrement humide.

Astuce



A l'aide d'une clé Allen n°4 , vous pouvez rendre plus ou moins souple le DogSim. Pour les débutants, si le DogSim est moins souple, c'est plus facile pour l'apprentissage.

SAV

Si, contre toute attente, votre appareil présente une anomalie qui n'est pas due à une utilisation non-conforme, nous vous invitons à prendre contact avec VISIOPTRONIC pour trouver une solution à votre problème en envoyant un mail à : technique@visioptronic.fr. Ne renvoyez pas l'appareil à VISIOPTRONIC sans accord préalable de prise en charge.

Caractéristiques techniques

Poids :	458 gr
Dimensions :	H (poignée à plat) 30 mm L 95 mm hors poignée 550 mm (non déployé) / 1100 mm (déployé)
Autres éléments :	livré en emballage individuel avec notice d'utilisation, également disponible en anglais

Les notices en pdf et fichier audio seront bientôt téléchargeables sur www.visioptronic.fr

Coordonnées du fabricant

VISIOPTRONIC
1 rue des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
FRANCE
+33 (0)2 41 68 15 18
www.visioptronic.fr

Référence produit



MADE IN FRANCE