Harnais

Introduction

Ce harnais et son guidon sont le fruit d'une collaboration franco-néerlandaise, née d'une amitié de plus de 15 ans. Son inventeur, Peter LASAROMS travaille en tant qu'éducateur pour l'Ecole KNGF à Amsterdam depuis plus de 20 ans. En s'associant à la Fondation VISIO, son idée de harnais idéal est devenue réalité en 2017.

L'ensemble harnais et guidon a été pensé pour favoriser le déplacement le plus confortable pour le chien qui le porte et pour son maître ou son éducateur. Ce produit est réservé exclusivement aux Ecoles de chiens guides membres de la Fédération Internationale IGDF (ou en cours d'accréditation).


Toute utilisation non-conforme se fait sur la responsabilité de son utilisateur. En aucun cas, VISIOPTRONIC, ou l'un de ses partenaires ne sauraient être tenus pour responsable en cas d'utilisation détournée.

Harnais & guidon forment un produit 100% français, assemblé en France et uniquement disponible via la société VISIOPTRONIC. Nous vous félicitons pour cette acquisition et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfaction en l'utilisant.

Découverte de l'ensemble

Il s'agit d'un ensemble de deux pièces (harnais et guidon) reliées par une pièce de jonction articulée.

Le harnais est fabriqué dans une matière souple et est très léger. Le chien peut le garder sans problème lorsque vous vous trouvez au travail, en réunion ou encore lors d'une courte détente. En cas de non-utilisation, le harnais peut être plié et se range facilement dans un sac de transport.

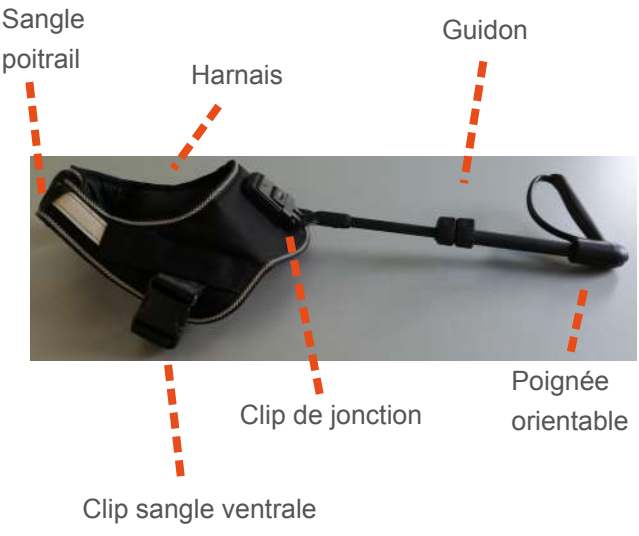



Le harnais dispose de deux sangles entièrement réglables (sangle ventrale et sangle du poitrail). Ceci permet de l'adapter à chaque chien guide adulte quelle que soit sa taille. La sangle ventrale se fixe par un clip de chaque côté du harnais et devient ainsi facile à atteindre, peu importe si vous marchez à gauche ou à droite de votre chien guide.
Le harnais est lavable (cf. recommandations à l'intérieur), nous préconisons un lavage à 40° max, possible en machine. Le séchage naturel est recommandé.
Le guidon se fixe par un point central sur le harnais au dos du chien. Il se distingue par la présence d'un manche télescopique permettant d'ajuster la longueur utile à tout utilisateur et d'une poignée rotative.
A niveau de la poignée, du côté du manche télescopique, se trouve un bouton poussoir. En l'enfonçant, la poignée peut être tournée à 360° pour s'adapter à une tenue en main la plus naturelle possible pour son utilisateur. En relâchant le bouton, la poignée se trouve automatiquement bloquée dans la position choisie.
L'ensemble pèse 595 grammes. Il peut être utilisé par des droitiers et des gauchers sans aucune différence d'efficacité.

Première utilisation



Avant toute première utilisation avec une personne déficiente visuelle, nous vous recommandons de lui faire découvrir l'appareil en le lui remettant en main et en expliquant les différentes parties qui le composent.

Séparez le guidon du harnais en appuyant sur le bouton poussoir central. Placez le harnais sur le chien et ajustez-le à sa taille. Pré-réglez la sangle niveau poitrail au mieux et demandez au chien « d'entrer » dans le harnais, puis ajustez définitivement les sangles.



Si le chien en début de formation refuse « d'entrer » dans son harnais (problème de sensibilité dû aux otites à répétition ou parce que le chien ne connait pas cet exercice), vous pouvez ouvrir la sangle côté poitrail et apposer le harnais sur le dos. Ensuite, réglez chaque sangle à convenance pour optimiser le port du harnais.

Prenez le guidon et fixez-le sur le harnais en utilisant le clip prévu à cet effet. Réglez la longueur idéale pour vous par rapport à la taille du chien et vos habitudes. Notez que vous pouvez très rapidement et très facilement modifier la longueur du guidon.

Vous pouvez également modifier la position de la poignée pour l'adapter soit à un gaucher ou un droitier, mais aussi ajuster le plus finement possible l'orientation de la poignée à la pronation naturelle de la main de son utilisateur.
Pour changer la position de la poignée, appuyez sur le bouton poussoir au bout du manche télescopique côté poignée. Ensuite réglez la poignée et laissez le bouton revenir dans sa position initiale, la poignée est à nouveau verrouillée.

La fixation du guidon au harnais a été conçue afin d'empêcher le guidon de tomber sur le dos ou la tête du chien, au cas où vous le lâcheriez accidentellement.


Cet ensemble est fort pratique pour les éducateurs travaillant avec plusieurs chiens à tour de rôle sur des séquences d'apprentissage courtes (quelques minutes). Réglez et apposez un harnais sur chaque chien, celui-ci peut le garder y compris au repos lorsque les autres chiens travaillent. Déclipsez simplement le guidon pour le fixer sur le harnais du chien suivant.



Pour une utilisation parfaite, une prise en main avant de travailler avec des personnes déficientes visuelles est indispensable. Plus vous allez utiliser ce harnais et son guidon, plus vous allez développer une aisance et une fluidité dans tous les exercices que permet notre outil.

Entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien spécifique. Il est conçu pour une utilisation par tous les temps. Non-corrosif, il ne nécessite aucun graissage spécifique. Entretenez son aspect extérieur en le nettoyant avec un chiffon doux, légèrement humide.

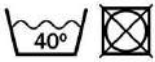

Le harnais est lavable en machine à 40° max. Séchage naturel recommandé.

SAV

Si contre toute attente votre appareil présente une anomalie qui n'est pas due à une utilisation non-conforme, nous vous invitons à prendre contact avec VISIOPTRONIC pour trouver une solution à votre problème. Ne renvoyez pas l'appareil à VISIOPTRONIC directement avant d'avoir établi une demande de prise en charge en envoyant un mail à : technique@visioptronic.fr

Caractéristiques techniques

Poids : 595 gr

Dimensions : Longueur du guidon 93.1cm déployé

Autres éléments : livré en emballage individuel avec notice d'utilisation, également disponible en anglais ou audiodescription, couleur noir, d'autres couleurs sur demande.
Prévu pour utilisation avec des chiens entre 25 et 50 kilos.

Les notices en pdf et fichier audio seront bientôt téléchargeables sur www.visioptronic.fr

Coordonnées du fabricant

VISIOPTRONIC
1 rue des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
FRANCE
+33 (0)2 41 68 15 18
www.visioptronic.fr

Référence produit

MADE IN FRANCE